



[www.rhopointinstruments.com](http://www.rhopointinstruments.com)



[sales@rhpointinstruments.com](mailto:sales@rhpointinstruments.com)



由英国 Rhopoint Instruments 制造




**HANATEK**  
通用样品切刀 USC

### 通用样品切刀

- 可针对多种测试类型进行配置
- 准确
- 可重复

# 通用样品切刀 (USC)

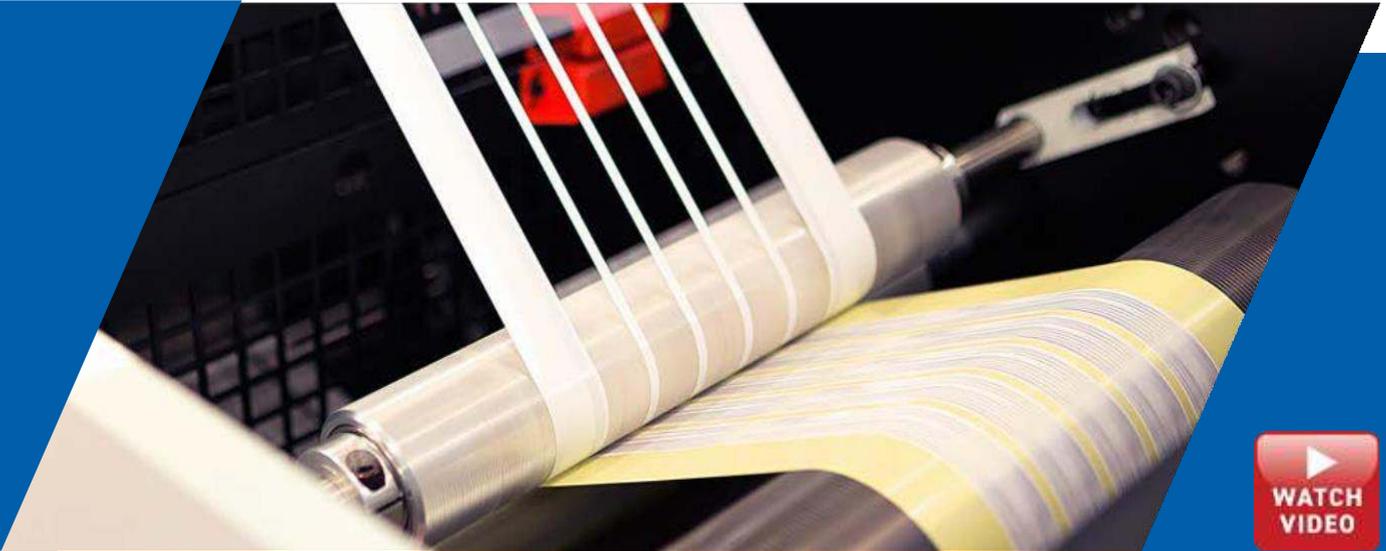


**Hanatek 通用样品切刀**专为实验室包装样品的简单快速切割而设计。

## 多种基材和测试类型

适用于各种基材，包括那些难以用传统刀具切割的基材。

- 薄膜，低至6 $\mu$ m
- 纸巾
- 纸
- 纸箱板
- 箔
- 层压板

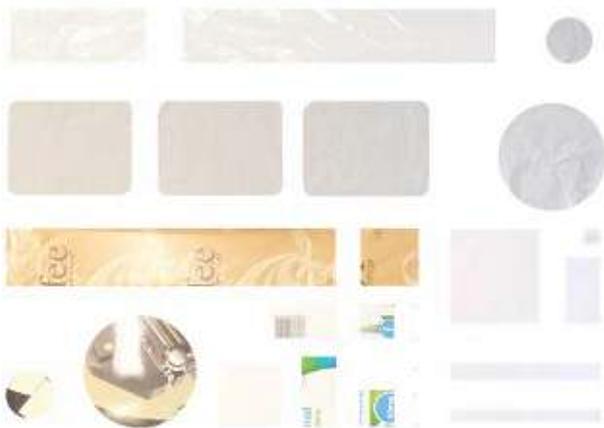

## 节省时间

通过同时制备多个样品节省宝贵的时间。



## 成本效益

USC 使用可互换的模具来适应不同的测试类型。只需为所需的测试类型购买一个新模具。

## 安全

提高操作员的安全性 - 无需手持刀具。

## 定制模具

使用定制模具是为多种测试类型准备样品的最快方法。只需一张材料，就可以准确快速地制备样品。

1个或2个相同的外形。



多达5种不同尺寸的外形。



超过5种不同尺寸的外形或形状内有额外冲孔。




特定包装尺寸的折痕和挺度样本。使用推杆进行对齐。



## 标准模具

我们有标准模具可用于切割大多数测试类型的样品，包括：

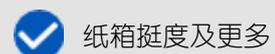

# 尺寸



小模具



大型模具




生产的样品始终符合规格  
与操作人员无关。

- 准确的
- 可重复
- 可靠

# 基材和标准

USC 适用于切割6 $\mu$ m至250 $\mu$ m的各种基材。

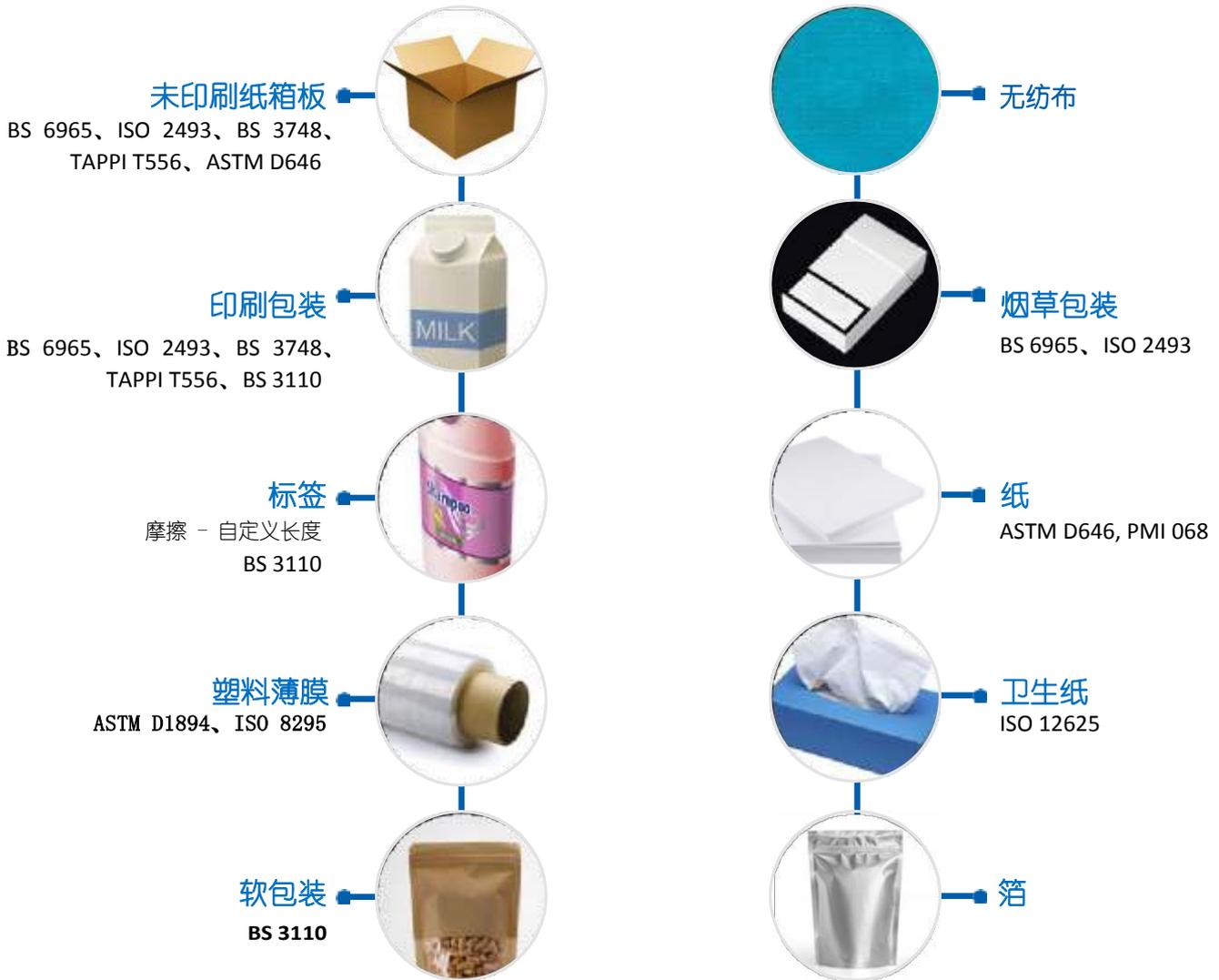

# 规格

仪器规格	详细
材料厚度	6µm至250µm
切割过程中施加的压力	2 psi
最大样品面积 (大模具)	340mm x 180mm
最大样品面积 (小模具)	180mm x 140mm

订购代码	详细
模具 - 折痕和纸板符合 BS6965	RL-B80-001
模具 - 摩擦符合 ASTM D1894 / ISO 8925 (FILM)	RL-B-CUTTER/FRICTION FILM
模具 - 摩擦符合 ASTM D1894 / ISO 8925 (BOARD)	RL-H-CUTTER/FRICTION-CFT
最大样品面积 (小模具)	180mm x 140mm
模具 - 折痕和纸板符合 BS6965	RL-B-CUTTER/CARTON
模具 - 摩擦符合 ASTM D1894 / ISO 8925 (FILM)	RL-B-CUTTER/FRICTION FILM
模具 - 摩擦符合 ASTM D1894 / ISO 8925 (BOARD)	RL-H-CUTTER/FRICTION-CFT
模具 - BS3110 摩擦测试	RL-B-CUTTER/RUB
模具 - 根据 ASTM D646 进行克重测试	RL-B-CUTTER/GRAMMAGE
定制刀模 - 1 或 2 个相同形状	RL-H-CUTTER/CUSTOM
定制刀模 - 多达 5 种不同尺寸的形状	RL-H-CUTTER/CUSTOM-2
定制刀模 - 超过 5 种不同尺寸形状或形状内的额外冲孔	RL-H-CUTTER/CUSTOM-3
定制刀模 - 折痕和挺度样本	RL-H-CUTTER/CUSTOM-4
指定的包装尺寸 (使用拉杆对齐)	

仪器尺寸	详细
尺寸	200mm (高) x 560mm (宽) x 390mm (深)
包装重量	14kg
包装尺寸	360mm (高) x 650mm (宽) x 500mm (深)
商品编码	9024 9000

校准	详细
所有模具都包含可追溯的校准证书	200mm (高) x 560mm (宽) x 390mm (深)

免费延长到 2 年保修：需要购买后 28 天内[www.rhopointinstruments.com](http://www.rhopointinstruments.com) 上注册。未经注册，适用 1 年标准保修。

校准和服务：通过我们的全球认证校准和服务中心网络提供快速、经济的服务。请登录[www.rhopointinstruments.com](http://www.rhopointinstruments.com) 了解详细信息。

工厂样品  
评估

发送您的材料，我们将根据所需的测试为您准备样品并返回给您评估

Rhopoint Instruments Ltd  
Rhopoint House, Enviro 21 Park, Queensway Ave S,  
St Leonards, TN38 9AG, UK  
T: +44 (0)1424 739 622  
E: sales@rhpointinstruments.com  
www.rhopointinstruments.com

Rhopoint Americas Inc.  
1000 John R Road, Suite 209, Troy,  
MI, 48083, United States  
T: 1.248.850.7171  
E: sales@rhpointamericas.com  
www.rhopointamericas.com

Rhopoint Instruments GmbH  
An der Kanzel 2  
D-97253 Gaukönigshofen, Deutschland  
T: +49 (0)9337 900-4799  
E: info@rhpointinstruments.de  
www.rhopointinstruments.de

上海泛彩图像设备有限公司  
Shanghai Pancolor Graphic Technologies Co., Ltd

电邮: [marketing@pan-color.com](mailto:marketing@pan-color.com)  
网址: [www.pan-color.com](http://www.pan-color.com)  
全国免费咨询电话: 400 7055 770 / 139 1638 2999  
地址: 上海市徐汇区漕宝路66号光大会展中心B座

All images are for illustrative purposes only

E&OE ©Rhopoint Instruments Ltd. March 2022